



Touchmed® Hydrocoll est un pansement élastique avancé, flexible et absorbant formé par une matrice adhésive polymère inerte dans lequel sont dispersés des granulés hydrophiles de CMC, de pectine et de gélatine.

Quand le pansement entre en contact avec les liquides biologiques, il les gélifie et les retient, favorisant ainsi la guérison dans un environnement humide. Le retrait du pansement qui s'ensuit est sûr et indolore. Le pansement est complété par une couche extérieure perméable à la vapeur d'eau et imperméable aux liquides et aux bactéries.


Avantages

- Favorise le débridement autolytique
- Guérison en environnement humide
- Maniable, flexible
- Existe pour le sacrum et talon
- Barrière bactérienne

Indications

TouchMed hydrocolloïde est indiqué pour la prévention et la gestion des lésions aiguës ou chroniques avec des niveaux d'exudats modérés ou faibles:

- Ulcères aux membres inférieurs
- Blessures en décubitus
- Blessures au pied diabétique
- Brûlures des degrés I et II
- Abrasions
- Escarres nécrotiques
- Peau sensible

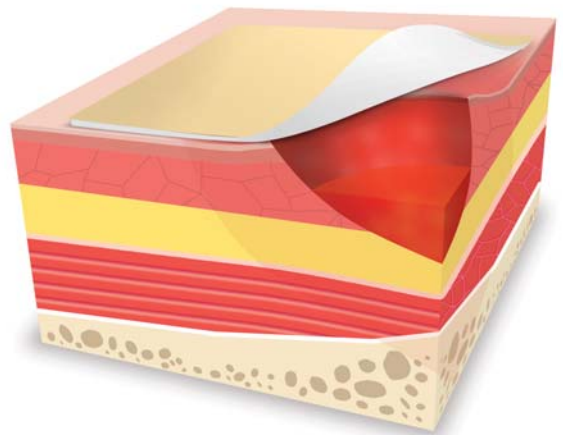

Normal



Stade de la plaie



Absorption



Mince




Stade de la plaie



Absorption



La version sans bord nécessite une fixation

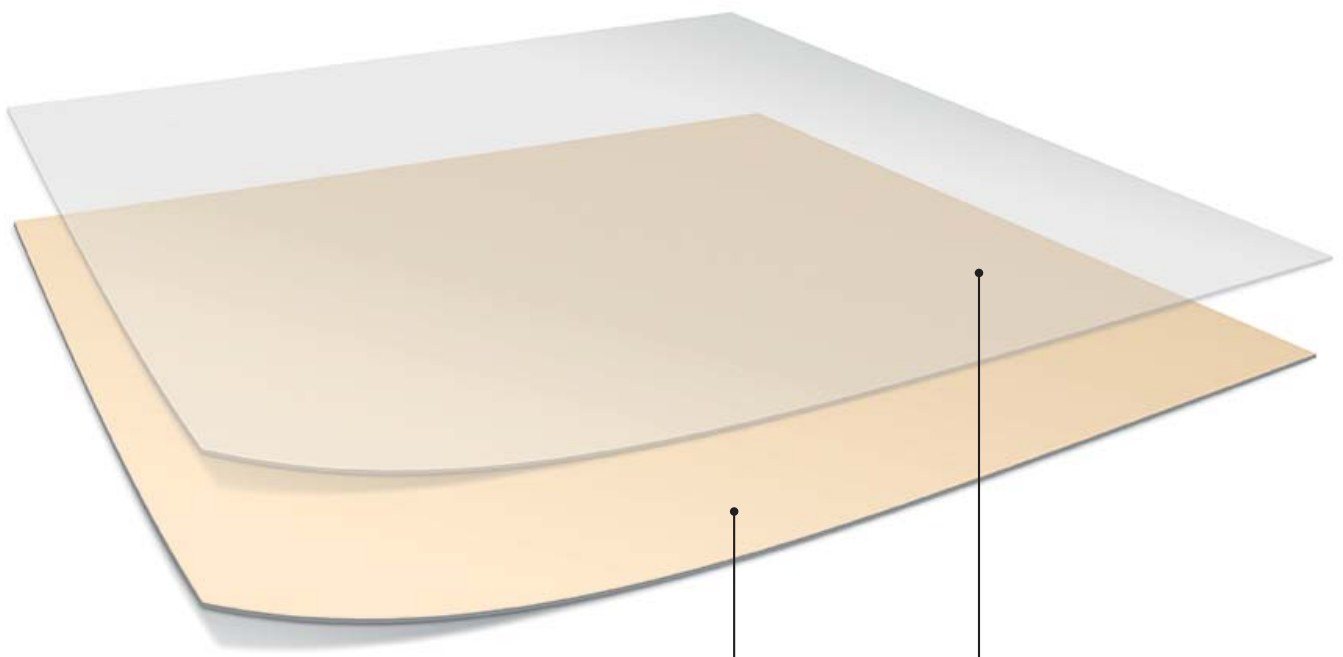

Idrocolloide

Film di poliuretano