




Pansment avec bord

L'adhésif en mousse TouchMed Foam Silicone est un pansement avancé multicouche de pointe conçu pour toutes les blessures nécessitant une absorption et une gestion de l'exsudat important. La mousse TouchMed possède une structure à 5 couches qui garantit d'excellentes performances contre les plaies exsudant abondamment sans endommager les tissus nouvellement formés ni la peau du périmètre. La couche de contact en silicone Softouch assure l'absorption verticale des exsudats et, par conséquent, une protection maximale de la peau périplecée contre tous les problèmes liés à la macération de la peau. Les couches intermédiaires absorbent et distribuent les fluides corporels de manière uniforme sur toute la surface utile du pansement, de manière à ce qu'ils soient retenus et gérés le plus longtemps possible. La haute qualité du film extérieur semi-perméable favorise les échanges gazeux et garantit une plus grande capacité d'absorption des liquides de pansement.


Pansment sans bord

TouchMed Foam Silicone est un pansement hydroactif constitué d'une mousse de polyuréthane absorbant à cellules mélangées à laquelle la technologie silicone Softouch a été associée. Le pansement est conçu pour toutes les plaies où l'exsudat doit être traité sans compromettre la guérison dans un environnement humide. La couche de contact Softouch garantit la protection des tissus nouvellement formés et de la peau environnante pour favoriser la guérison naturelle. La couche externe en film de polyuréthane semi-perméable assure une protection contre les agents externes tels que les liquides et les bactéries.

Pansement avec bord

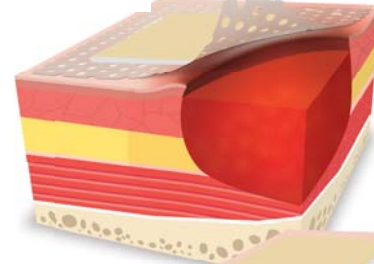

Pansement sans bord

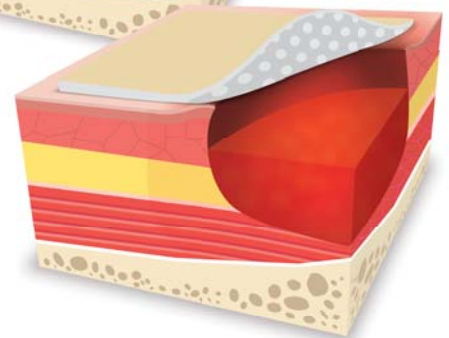

Avantages

- Absorption verticale
- Annule le risque de macération
- Doux et flexible
- Enlèvement atraumatique
- Guérison dans un environnement humide
- Peut-être coupé
- Exsudat ne revient pas sur la plaie
- SAP absorbe plus

Indications

TouchMed Foam Silicone est indiqué pour un large éventail de plaies à exsudation chroniques aiguës telles que:

- Ulcères diabétiques
- Ulcères veineux et artériels
- Brûlures des degrés I et II
- Blessures en décubitus
- Ulcères oncologiques
- Excellent comme bandage préventif et sous élastocompressif

Normal

Mince



Stade de la plaie

1 2 3 4

Absorption

Avec bord



Sans bord



Stade de la plaie

1 2 3 4


Absorption



Disponible en différentes tailles, tailles spécifiques pour le sacrum et le talon. La version sans bord nécessite une fixation supplémentaire.



Medicazione con bordo

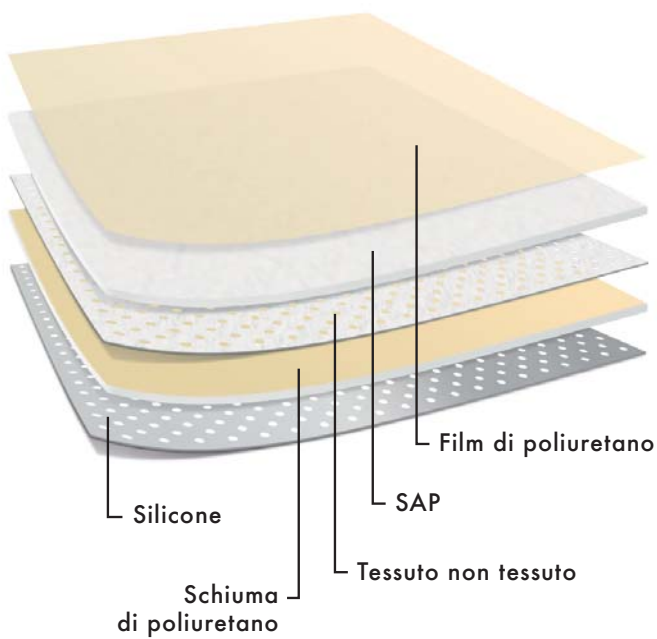

Medicazione senza bordo

